

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	13-5-2020
Inkoopnummer	302120
Lotnummer	860
Leverancier	2020-0151-02
Productnaam of naam fabrikant	Lian you
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	K951 958

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	85%	P1
0,5	95%	P2

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	22	66
Testpersoon 2	10	25
Testpersoon 3	84	85
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input checked="" type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			—
Oordeel AH/TOXI			—
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4	X	Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	860
Datum uitvoering check	13-5-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant			
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
Advies: afgevee Type masker bij uitgifte: 950			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notifieerde bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	- PFE ondermaats (99%) - Fit met op
--------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	50
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	KN95
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	/
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: GB 2626: 2006 CIAN 49 MODEL 9501
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 PPE COTTON of elix PPE
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>


Bijzonderheden: *- Lucht ontsnapt bij neus bij cup-test.*

Fittest by RIVM

Datum	13/5
LOT/X-nummer	860

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input checked="" type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	---	---

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 5.1.2e	doos nr 1	82		66
2. 5.1.2e	doos nr 2	10		25
3. 5.1.2e	doos nr 3	84		85
4.				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?		iets		iets
			Is één clip voldoende?	ja

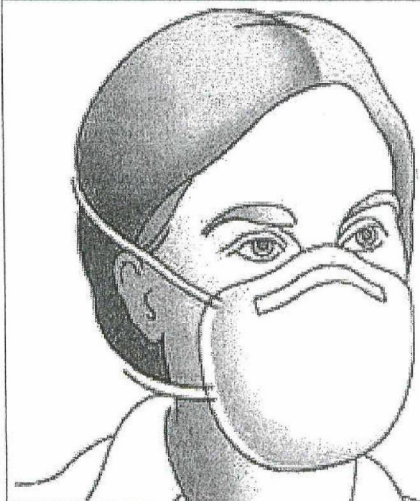

stevige neusclip
maar dun, niet zo
comfortabel als je 'm
stevig aandrukt.

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)

Type FFP-Masker	FFP2
Fit test (FAIL of PASS)	PASS

Particle Penetration by Kalibra

Datum	13 mei 2020
Inkoopnummer	302120
LOT/X-nummer	LOT 860

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Faill t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	87 %	P1	96 %	P2
Masker 2	93 %	P1	98 %	P2
Masker 3	85 %	P1	92 %	P1
Totaal gemiddelde	88 %	P1	95 %	P2

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	153	< 240 Pa	S
Masker 2	181		S
Masker 3	178		S

Eindoordeel > 0,3
voldoet aan P ₁
Eindoordeel > 0,5
voldoet aan P ₂

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

13-05

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

~~860~~ 860

Aantal pallets

57

Totaal stuks

505.000

Aantal samples

150

Totaal aantal na samples

504.850

Aantal per pallet

9000

Aantal per doos

500

Aantal per verpakkingseenheid

50

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

958

Inkooporder nummer

302120

LCH-nummer

Lch 2020-0151-02

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

013 - 001 - 01

ingeboekt door:

013 117 01

Model IRU / Auteursrecht sVa / Stichting Vervoeradres - 's-Gr.

www.beurtvaartadres.nl

Tel. 088-55 22 111

Uitgave **Beurtvaartadres**

Art. 3002

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dit omlijnde vakken moeten worden ingevuld door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingetragenen Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

1-15 y compris et / inbegrepen aansluitend

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders



LA 4Z
NN

Destinataire geadresseerde Empfänger		LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer	No Nr																																				
Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land) KLM Schiphol		Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.		NL																																					
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land) CB healthcare Vianen		16 Transporteur Frachtführer		5.1.1c																																					
3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) Vianen NL		17 Transporteur Nachfolger																																							
4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) Schiphol 13-05-2020		18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers																																							
5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefügte Dokumente																																									
6 Marques et numéros / Merken en nummers Kilozichenen und Nummern	7 Nombre de colis / Aantal coil Anzahl der Packstücke	8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung	9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Beschreibung des Gutes	10 No statistique / Statistisch nummer / Statistieknummer	11 Poids brut / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg	12 Cubage m3 / Volume in m3 Umlauf in m3																																			
<p>32 Europallets medische goederen</p> <p>074-36485831 - LCH-0151 -> 23 pallets</p> <p>074-36482946 - LCH-0060-11 -> 9 pallets</p> <p>13 MAY '20 10:57</p>																																									
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders regel nr: 0237 6772		5.1.2e																																							
14 Prescriptions d'affranchissement / Frankingvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen <input type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei		<table border="1"> <tr> <td>Prix de transport / Vrachtprijs Fracht:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Reductions / Kortingen Ermäßigungen:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Solde / Saldo Zwischensumme:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Suppléments / Supplementen Zuschläge:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Frais accessoires / Bijkomende kosten / Nebengebühren: +</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL / TOTAL GESAMTSUMME:</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Prix de transport / Vrachtprijs Fracht:						Reductions / Kortingen Ermäßigungen:						Solde / Saldo Zwischensumme:						Suppléments / Supplementen Zuschläge:						Frais accessoires / Bijkomende kosten / Nebengebühren: +						TOTAL / TOTAL GESAMTSUMME:					
Prix de transport / Vrachtprijs Fracht:																																									
Reductions / Kortingen Ermäßigungen:																																									
Solde / Saldo Zwischensumme:																																									
Suppléments / Supplementen Zuschläge:																																									
Frais accessoires / Bijkomende kosten / Nebengebühren: +																																									
TOTAL / TOTAL GESAMTSUMME:																																									
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in Schiphol le / de am 13-05-2020		15 Remboursement / Rückerstattung																																							
22		23		24 Merchandises reçues / Goederen ontvangen																																					
5.1.2e		5.1.2e		5.1.2h																																					
Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders		Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers		Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers																																					

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders
 1-15 y compris et / inbegrepen einschließl
 19+21+22 Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingetragenen Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

<p>2 Des destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Emplinger (Naam, Adrescht, Land) KLM Schiphol CB B huuldseur</p>		<p>LE TITRE DE VOTRE DOCUMENT DE TRANSPORT VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT</p>		<p>Code transporteur Vervoerdescode No 179884</p>	
<p>3 [Redacted] 5.1.2h por de aflevering</p>		<p>16 F [Redacted] 5.1.1c 17 F [Redacted]</p>		<p>Indien de overeenkomsten plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, anderszels van toepassing. Indien de overeenkomsten plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Voeding afzender in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, anderszels van toepassing. Indien de overeenkomsten plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in drie of meer verschillende landen zijn het CMR-Voeding afzender in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, anderszels van toepassing. NL</p>	
<p>4 Let op dat op dit vervoerdocument op de lijn "Vervoeradres, adres, adres" de aflevering van de goederen plaatsvindt op de datum die is aangegeven op het vervoerdocument van de afzender. Schiphol 13-05-2020</p>		<p>18 Respons et observations du transporteur / Voordracht en opmerkingen van de vervoerder Verschillen und Bemerkungen des Frachtführers</p>		<p>Code transporteur Vervoerdescode No 179884</p>	
<p>5 Documents annexes / Bijgevoegde documenten</p>		<p>10 No. entrega / Stationsnummer 11 Poids brut / Bruto gewicht 12 Contingents / Inhoud</p>		<p>6 Adresse et numéro / Adres en nummer 7 Numéro de code / Num. code 8 Adresse de destination / Bestemming 9 Description des biens 10 No. entrega / Stationsnummer 11 Poids brut / Bruto gewicht 12 Contingents / Inhoud</p>	
<p>13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Aanwijzingen des Absenders 22 23 24</p>		<p>14 Prescriptions d'emballage / Verpakkingvoorschrift Fiches de renseignements / Informatiekaartjes Non franco / Niet franco / Umtiel 22 23 24</p>		<p>15 Remboursement / Rückzahlung 22 23 24</p>	

Handwritten notes:
 33 Euro pallets medische goederen
 074-5640-3031
 074-5640-3031
 074-5640-0151
 13 MAY 20 10:57



LA 4Z NN