

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	27-05-2020
Lotnummer	1034
Leverancier/LCH-nummer	LCH 3057 23162 - STA 0520
Productnaam of naam fabrikant	Storbuss - JINGXI Homet Indust.
Productiedatum	06-05-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN 95

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	99%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	6,3	9,6
Testpersoon 2		9,2
Testpersoon 3		
FFP2	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM		+/-	
Oordeel AH/TOXI		+/-	
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	nee	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		<80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer	302576	LOT-nummer	1034
Datum uitvoering check	29-5-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Jiangxi Homet Industrial.		
Productnaam of naam fabrikant	Standuss		
Productiedatum	6-5-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie	Arbeidshygiënist		
Besproken met RIVM			
Advies:	Afkenn.		
Type masker bij uitgifte:	nut.		

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Goed filtermateriaal Fittest faalt 1 doos bevat ander masker qua neusbeugel en opdruk doos 3 1
----------------------------	--

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>24</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>3D Nano facial protective mask</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Starbuss</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt <i>op binnenzak</i>
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>6-5-2020</i>

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER						
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:					
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:					
3	Wat staat er op het masker: KN 95 GB 2626-2006					
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.					
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.					
4	Is de stof is non woven? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee					
5	Aantal lagen van het masker: doos 3 <table border="1"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 1 wit</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 2 wal</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 3 nano poly</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 4 poly</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 5 poly</td> </tr> </table>	<input checked="" type="checkbox"/> 1 wit	<input checked="" type="checkbox"/> 2 wal	<input checked="" type="checkbox"/> 3 nano poly	<input checked="" type="checkbox"/> 4 poly	<input checked="" type="checkbox"/> 5 poly
<input checked="" type="checkbox"/> 1 wit	<input checked="" type="checkbox"/> 2 wal	<input checked="" type="checkbox"/> 3 nano poly	<input checked="" type="checkbox"/> 4 poly	<input checked="" type="checkbox"/> 5 poly		
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee					
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes					
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.					
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los					
10	Neusstuk 1* 2* <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>					

Bijzonderheden:

doos 3 wijkt af beugel in masker, ander masker. neusbeugel is vast verwerkt in andere elastiek

~~doos 2 - 26 m. dit~~

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?	
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?	

Bijzonderheden:


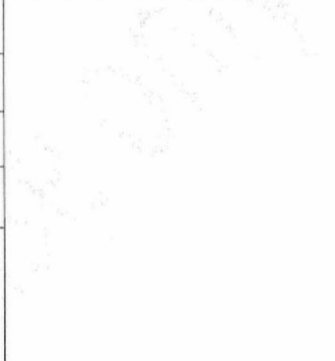

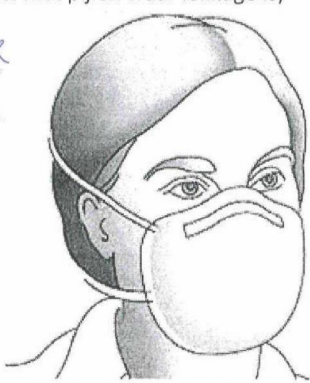
Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

LCH & VWS use only

Fittest by RIVM

Datum	22 mei -20
LOT/X-nummer	1034

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1.  (1)	Zonder te ruim.	6,3		9,0
2.  (2)		/		9,2
3. _____				
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				
			Is één clip voldoende?	
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
ademresistentie laag 				

Type FFP Masker	lwg5
Fit test (FAIL of PASS)	fail

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Particle Penetration by Kalibra

Datum	22 mei 2020
Inkoopnummer	30 25 76
LOT/X-nummer	1034

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99%	P3	100%	P3
Masker 2	97%	P2	100%	P3
Masker 3	100%	P3	100%	P3
Totaal gemiddelde	99%	P3	100%	P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	148	< 240 Pa	Voldoet
Masker 2	122		Voldoet
Masker 3	180		Voldoet

Eindoordeel > 0,3

Voldoet aan P3

Eindoordeel > 0,5

Voldoet aan P3

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Particle Penetration by Kalibra

Datum	28-05-2020
Inkoopnummer	302576
LOT/X-nummer	1034

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	97 %	Pass P ₂	100 %	Pass P ₃
Masker 2	98 %	" P ₂	99 %	" P ₃
Masker 3	97 %	" P ₂	99 %	" P ₃
Totaal gemiddelde	97 %	" P₂	99 %	" P₃

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	83	< 240 Pa	Pass
Masker 2	135		Pass
Masker 3	121		Pass

Eindoordeel > 0,3

Voldoet aan P₂

Eindoordeel > 0,5

Voldoet aan P₃

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2e

Datum: 20-05-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer 1034

Aantal pallets	31
Totaal stuks	338688
Aantal samples	72
Totaal aantal na samples	338616
Aantal per pallet	11.232
Aantal per doos	864
Aantal per verpakkingseenheid	24

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: _____

Paraaf: _____

Artikelnummer: 958

Inkooporder nummer 302576

LCH-nummer

3057-2316a STA 0520

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

kn95 MASKER

Locatie: 019 - 043 - 05

ingeboekt door:

2

Exemplaire pour destinataire LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
 Exemplar für geadresseerde VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
 Empfänger Empfänger FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR

AVC

25 Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer No N°

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
 Absender (Name, Anschrift, Land)
 Halma Solutions
 IJzerwerf 10-12
 6641 TK Beuningen

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.

NL 20062177

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing. De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

5.1.2h

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoeder (naam, adres, land)
 Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
 AG Logistics Services
 IJzerwerf 10-12
 6641 TK Beuningen

3 der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)
 5.1.2e

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)
 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

4 Date et heure de prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)
 20-5-20
 Beuningen Nederland

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoeder
 Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten
 Beigefügte Dokumente

5.1.2e

6 Marques et numéros / Merken en nummers
 Kennzeichen und Nummern
 7 Nombre de colis / Aantal coli
 Anzahl des Packstücke
 8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking
 Art der Verpackung
 9 Nature de la marchandise / Aard der goederen
 Bezeichnung des Gutes
 10 No statistique / Statistisch nummer / Statistiknummer
 11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg
 12 Cubage m3 / Volume in m3
 Verpflichtingennummer: 3057-23160
 Xolg Starbuss, 70, 392 dozen, 338.658 stuks
 31pp
 3 europallets - zijgeruild.
 28 wwp
 20 MAY '20 15:58
 4200 kg

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender
 Anweisungen des Absenders

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
 Besondere Vereinbarungen
 aank. 15.30
 Optrrek 16.00
 Westeren

20	Arrivée heure / Aankomsttijd Ankunftszeit	Départ heure / Vertrektijd Abfahrtszeit	Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit
Adresse de chargement: Loadadres: Ladeadresse:			
Adresse de déchargement: Losadres: Entladeadresse:			

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift
 Frachtzahlungsanweisungen
 Franco / Frei
 Non franco / Niet franco / Unfrei

21 Etablie à / Opgemaakt te
 Ausgefertigt in
 Beuningen 20-5-20

15 Remboursement / Remboursement / Rückerstattung

tiakconcurrent.nl
 wareshuis voor de logistiek

22 AG Logistics Services B.V.
 IJzerwerf 10-12
 6641TK Beuningen
 5.1.2e @aglogistics.nl
 Tel: 5.1.2e

23

32-DT-1
 Westeren
 5.1.2e
 5.1.2e

Nabestellen: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 1-15, 19 + 21 + 22

version 6.0 14/03/18 model IRU

Les parties et numéros de ces documents doivent être remplis par le transporteur / De ditte omliggende vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingetragenen Angaben sind zu ergänzen durch den Frachtführer