

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum: 26-05-20

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer 1215

Aantal pallets 21

Totaal stuks 311.000

Aantal samples 75

Totaal aantal na samples 310.925

Aantal per pallet 15000

Aantal per doos 1000

Aantal per verpakkingseenheid 25

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: _____

Paraaf: _____

Artikelnummer: 950

Inkooporder nummer 302915

LCH-nummer

3057-23160-JEL07

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie: 22-121-01

+1/m

22-161-01

ingeboekt door:

2625

2


Exemplaire pour destinataire LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
 Exemplaar voor geadresseerde VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
 Exemplar für Empfänger FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT



25 Code transporteur No
 Vervoerderscode Nr
 Code Frachtführer

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
 Absender (Name, Anschrift, Land)
 Malma Solutions
 IJzerwerf 10-12
 6641TK Beuningen

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 20 laatste versie, van toepassing.
 NL 20062182
 Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
 De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrecht te Amsterdam en Rotterdam.

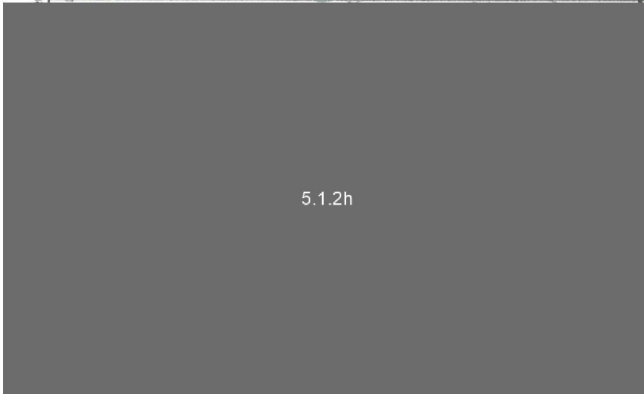

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land)
 Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
 AG Logistics services
 IJzerwerf 10-12
 6641TK Beuningen

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)
 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
 328604

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder
 Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers
 02-43-GL

5 Documents annexes / Bijgevoegde documenten
 Beigefügte Dokumente

6 Marques et numéros / Merken en nummers
 Kennzeichen und Nummern
 7 Nature de colis / Aantal colli
 Anzahl der Packstücke
 8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking
 Art der Verpackung
 9 Nature de la marchandise / Aard der goederen
 Beschreibung des Gutes
 10 No statistique / Statistisch
 nummer / Statistiknummer
 11 Poids brut, kg / Bruto gewicht
 in kg / Bruttogewicht in kg
 12 Cubage m³ / Volume
 Umfang in m³
 Verplichtingennummer: 3037-23160
 X016, (G08), 4 pp, 51 dozen, 51.000 stuks
 X016, (G02), 2 pp, 311 dozen, 311.000 stuks
 27 m³
 beuropallets
 4900 kg

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender
 Anweisungen des Absenders
 * Geen euro's retour *
 - LB VIAVEN -
 = 6 EURO'S

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
 Besondere Vereinbarungen

20	Arrivé heure / Aankomsttijd Ankuntszeit	Depart heure / Vertrektijd Abfahrtszeit	Total heure / Totaaltijd Gesamtzeit
Adresse de chargement: Laadadres: Ladeadresse:			
Adresse de déchargement: Losadres: Entladeadresse:			

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift
 Frachtzahlungsanweisungen
 Franco / Frei
 Non franco / Niet franco / Unfrei

21 Etablie à / Opgemaakt te
 Ausgefertigt in le / de
 am
 beuningen 2

15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung

22
 A G Logistics Services B.V.
 IJzerwerf 10-12
 6641TK Beuningen
 5.1.2e

5.1.2e

Nabestellen: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

version 6.0 14/03/18 model IRU

iekconcurrent.nl
 warenhuis voor de logistiek

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être
 worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten
 1-15, 19 + 21 + 22

To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid
 van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	27-5
Lotnummer	1215
Leverancier/LCH-nummer	Kalmq
Productnaam of naam fabrikant	5.1.2e
Productiedatum	08-5-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	KN95

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Type P1/P2/P3
Masker 1	99%	P3
Masker 2	100%	P3
Masker 3	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	10	5
Testpersoon 2	10	36
Testpersoon 3	10	20
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL <input type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
g50	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen: afkeur op fit.		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	1215
Datum uitvoering check	28-5-20		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	KNGS Non Facial Protective mask (Jelle		
Productiedatum	9-5-2020 Jelle		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
Advies: Type masker bij uitgifte: FFP2, afnew op fit			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Belande "non facial protective mask" verpakking: geen CE, geen N.Bb. wel FFP2, KNGS, EN149 & Geen Starbiss op verpakking Masker: KNGS, GB2626-2006.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	verschillen tussen maskers: met name in grootte
--------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	25 .
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3D nano Facial Protective Mask .
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Jiangxi Hornet Ind. (Jelle Starbus).
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) FFP2 . <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	per 5
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: nvt

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KNG5 GB 2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input checked="" type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>wel slap</i> <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?	
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?	

Bijzonderheden:


Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

LCH & VWS use only

Fittest by RIVM

Datum	27/5/2020
LOT/X-nummer	1215

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1	(1) real time	<10	slap elastiek	5
2	(2) real time	<10		36
3	(3) Realtime	<10		20
4.				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				
			nee	
			Is één clip voldoende?	
			ja	
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
				

Type FFP Masker	FFP2
Fit test (FAIL of PASS)	FAIL

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Particle Penetration by 5.1.2e

Datum	27-05-2020
Inkoopnummer	302915
LOT/X-nummer	1215

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 2	100%	" P3	100%	" P3
Masker 3	100%	" P3	100%	" P3
Totaal gemiddelde	100%	" P3	100%	" P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	111	< 240 Pa	Pass
Masker 2	98		Pass
Masker 3	98		Pass.

Eindoordeel > 0,3
Voldoet aan P3.
Eindoordeel > 0,5
Voldoet aan P3.

Disclaimer: Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.