

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	04-05-2020
Inkoopnummer	301404
Lotnummer	722
Leverancier	2020-3057-2360 Halmca
Productnaam of naam fabrikant	Starbuss
Productiedatum	04/02/2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	90%	P2
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	zit los beide	8
Testpersoon 2	aanraak	9
Testpersoon 3		
FFP2	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:	Fidjest fault. Gevoel erg laag. Zowel met als zonder clip.		

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen:		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Goedkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Goedkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	<input checked="" type="checkbox"/>	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	Ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	722
Datum uitvoering check	4/5/2020		
Leveringsdatum			
Leverancier	Stambuss		
Productnaam of naam fabrikant	3D Nano Facial Protective Mask		
Productiedatum	22/4/2020		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
Advies: Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	Fittest fault. Scoot as laag. Zowel metals zonder elop
----------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>16</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? <i>3D Nano Facial Protective Mask</i>
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? <i>Starbus</i>
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <i>3 years</i>

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>Per 2 stuks</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk, <i>soms niet als schief schuurt</i> <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde, <i>wel wat verschilt aan de rand</i> <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <i>germeden bij alle rand</i>
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>- metalen neuskleem</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>KN 95 GB 2626-2006</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest <input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

zie afbeelding

Bijzonderheden:


*Fiddest faalt -
Masker moet ventileren aan.*

Fittest by RIVM

Datum	4/5/20
LOT/X-nummer	722

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. 5.1.2e	Zit waan alle kanten		Zit benaauwd	8
2.			L	9
3.				
4.				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				ja
			Is één clip voldoende?	ja

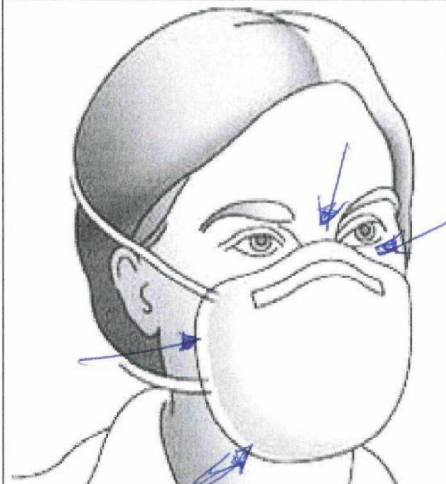

- neusbengel heeft scherpe 'vouw' in moeilijk zonde buigen ook met lichte clip blijft lekke rondom

- benaauwd

-

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)

Type FFP Masker	FFP2
Fit test (FAIL of PASS)	fail

Particle Penetration by Kalibra

Datum	4 mei 2020
Inkoopnummer	301 484
LOT/X-nummer	722

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	98%	Pass P2	100%	Pass P3
Masker 2	99%	Pass P2 P3	100%	Pass P3
Masker 3	98%	Pass P2	99%	Pass P3
Totaal gemiddelde	98%	Pass P2	100%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	108 Pa	< 240 Pa	Pass
Masker 2	140 Pa		Pass
Masker 3	86 Pa		Pass

Eindoordeel > 0,3

Volgt aan FFP2

Eindoordeel > 0,5

Volgt aan FFP3

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

03-05-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

722

Aantal pallets

15

Totaal stuks

103.680.

Aantal samples

48

Totaal aantal na samples

103.632

Aantal per pallet

6.912

Aantal per doos

576

Aantal per verpakkingseenheid

16

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

 JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

958

Inkooporder nummer

301484

LCH-nummer

3057-23160-STA0503A

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

5.1.2h

ingeboekt door:

2

Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land) Absender (Name, Anschrift, Land) 5.1.2e Logistics (Netherlands) B.V. Care of: Halma Solutions BV Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands		Lettre de voiture - Document de transport VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT		CMR	AVC	25 Code transporteur / Vervoerderscode Code Frachtführer	No Nr
16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land) Frachtführer (Name, Anschrift, Land) Schiphol Express Shannonweg 11 1118 LA Luchthaven Schiphol The Netherlands		17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land) Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)		18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers Dossier: 430/319407 Ref: REF 3057-23160		19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten Besondere Vereinbarungen In case of discrepancies and/ or events concerning transport & delivery please contact a.s.a.p.: logistics Netherlands +31 (0)20 405 99 00	
2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land) Empfänger (Name, Anschrift, Land)		3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land) 5.1.2h		4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum) THE NETHERLANDS 1/05/20		6 Marques et numéros / Merken en nummers 7 Nombre de colis / Aankst coll / Anzahl der Packstücke 8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking 9 Nature de la marchandise / Aard der goederen / Bezeichnung des Gutes 10 No statistique / Statistisch nummer / Staatnummer 11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg 12 Contage net / Volume in m3 / Umfang in m3	
5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten Beigefugte Dokumente		6 999-76301842 180 CTNS TCG2004904AE		7 180 8 CTNS FACIAL MASKS		11 1248,000 12 18,54	
13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender Anweisungen des Absenders The receiver of the goods, through signing in box 24, will be liable for the correct and timely processing of the attached NCTS documents (T1).		14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift Frachtzahlungsanweisungen <input type="checkbox"/> Franco / Frei <input type="checkbox"/> Non franco / Niet franco / Unfrei		15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung		20	
21 Etablie à / Opgemaakt te Ausgefertigt in Luchthaven Schiphol 1/05/20		22		23		24	
Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender		Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers		Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift		24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen Aard, Inkomende Goederen Lieu / Plaats Le / de Getekend voor aantal ontvangen pallets 12 x pallets 5.1.2e	

Nabestellen: www.cmirconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999
 Les parties engagées de l'opus grasse doivent être remplies par le transporteur / De afz. en de vervoerder moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingetragenen Blätter müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden
 version 3.1 22/05/13 model IRU
 To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

