

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

| | |
|--|------------|
| Datum | 7-5 |
| Inkoopnummer | 301696 |
| Lotnummer | 750 |
| Leverancier | Halmac |
| Productnaam of naam fabrikant | 5.1.2e |
| Productiedatum | 27/04/2020 |
| Type mondmasker (volgens de fabrikant) | FFP2 - g50 |

| Q1 Particle Penetration | Testgemiddelde | Type P1/P2/P3 |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 0,3 | 100% | P3 |
| 0,5 | 100% | P3 |

| Q2 Fit test | Zonder clip | Met clip |
|---------------|-------------------------------|--|
| Testpersoon 1 | - | 69 |
| Testpersoon 2 | < 10 | 4 |
| Testpersoon 3 | < 10 | 200+ |
| FFP2 | <input type="checkbox"/> FAIL | <input checked="" type="checkbox"/> PASS |

| Q3 en Q4 | + | +/- | - |
|-----------------------|---|-----|---|
| Oordeel RIVM | + | | |
| Oordeel AH/TOXI | + | | |
| Algemene bevindingen: | | | |

| Artikelnummer VWS | Quality Check | Uitleg indien ON HOLD: |
|-----------------------|--|------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold | |
| Algemene bevindingen: | | |

| Logistiek | Aankruisen | Classificatie | Clip (Ja/Nee) | Specs. | |
|-----------|------------|--|---------------|-------------|--------------|
| | | | | PFE | FIT |
| Mand 1 | | Goedkeur: FFP2 | | >94% | >100 |
| Mand 2 | ✓ | Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT | Ja. | >94% | 33<FIT<100 |
| Mand 3 | | Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit* | | 80%<PFE<94% | >100 |
| Mand 4 | | Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57) | | 80%<PFE<94% | 33<FIT<100 |
| Mand 5 | | Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood | | >94% | <33 |
| Mand 6 | | Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood | | 80%<PFE<94% | <33 |
| Mand 7 | | Afkeur: Niet gebruiken | | < 80 | Ongeacht fit |

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

2

LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR

AVC

25 Code transporteur
Vervoerderscode
Code Frachtführer

No
Nr

Nabestellen: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999
 version 7.0 28/01/19 model IRU
 To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid
 van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders
 Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld
 worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Rubriken müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
APEX Global logistics
Fokkerweg 300, Fokker 5
1438 AN, Oude-Meer

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
NL
Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)
Centraal Broekhuis
Laanakkerweg 14
4131 PB Vianen

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land)
Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
ag Transport

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)
4131 PB Vianen

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)
Oude Meer

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder
Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers
Loading ref :truck 09:00 AM

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten
Beigefügte Dokumente
N/A

| 6 Marques et numéros / Merken en nummers Kennzeichen und Nummern | 7 Nombre de colis / Aantal coll. Anzahl die Packstücke | 8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking Art der Verpackung | 9 Nature de la marchandise / Aard der goederen Bezeichnung des Gutes | 10 No statistique / Statistisch nummer / Statistknummer | 11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg | 12 Cubage m ³ / Volume in m ³ Umfang in m ³ |
|---|---|---|---|--|--|---|
| 826-0014 8186 | 8 | X019 | STARBOSS | 190 | Pieces | 3263 kg |
| 826-00148470 | 8 | X016 | JELLE | 183 180 | Pieces | 2839 kg |

DEL REF: 3057-23160
 x 016 JELLE 180 MIJNEN 3 DOZEN
 x 019 STARBOSS 190
 25 WEGWERP PALLETS BELAST

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender
Anweisungen des Absenders
DEL REF: 3057-23160
Delivery TUE 05/05/20

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
Besondere Vereinbarungen
193

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift
Frachtzahlungsanweisungen
 Franco / Frei
 Non franco / Niet franco / Unfrei

20 Arrivé à / Aankomsttijd
Ankunftzeit
Depart heure / Vertrektijd
Abfahrtszeit
Total heure / Totaaltijd
Gesamtzeit

21 Etabli à / Opgemaakt te
Oude Meer le / de
am 03/05/20

15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung
150 pallets

22 Apex Global Logistics (NL) B.V
Fokkerweg 300, Fokker 5
1438 AN, Oude-Meer
5.1.2e

24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen
Gut empfangen
Lieu / Plaats
Ort le / de
am 5.1.2e

Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders

Signature et timbre du transporteur / Handtekening en stempel van de vervoerder / Unterschrift und Stempel des Frachtführers
Driver: 41-BUS 7

Signature et timbre du destinataire / Handtekening en stempel van de geadresseerde / Unterschrift und Stempel des Empfängers



Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

| | | | |
|---|---------------------------------|------------|-----|
| Inkoopnummer | 301696 | LOT-nummer | 750 |
| Datum uitvoering check | 8-5-2020 | | |
| Leveringsdatum | | | |
| Leverancier | Starbuss | | |
| Productnaam of naam fabrikant | 3D Nano Facial Protective mask. | | |
| Productiedatum | 27-4-2020 | | |
| Naam | Lika | | |
| Functie | Arbeidshygiënist | | |
| Besproken met RIVM | 5.1.2e | | |
| Advies: Type masker bij uitgifte: | | | |

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|---|
| Technical data sheet aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Garantiecertificaat aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Declaration of conformity aanwezig? | <input type="checkbox"/> Ja | <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| Oordeel van RIVM | Belede Starbuss | |

Prestatie levering

| | |
|--------------------------|--|
| Oordeel arbeidshygiënist | sticker Non medical is nieuw op binnendoos + Pittest + filtertest- |
|--------------------------|--|

| BINNENDOOS/PLASTICZAK | |
|-----------------------|--|
| 1 | Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 25 |
| 2 | Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl: Sticker NON medical. |
| 3 | Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? 3D Nano Facial Protective Mask FFP2 |
| 4 | Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? Stambuss |
| 5 | Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| 6 | Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL-2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input checked="" type="checkbox"/> Anders... N99 + FFP2 <input type="checkbox"/> Geen |
| 7 | Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt |
| 8 | Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. |
| 9 | Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee 27-4-2020 3 jaar erna. |

Bijzonderheden:

| VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER ⁵ | |
|---|--|
| 1 | Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee Zo ja: |
| 2 | Hoe is de verpakking te openen? <input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk |
| 3 | Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: hvt |

Bijzonderheden:

| HET MASKER | |
|------------|--|
| 1 | Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: |
| 2 | Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <input checked="" type="checkbox"/> metaal stuk zit op de buitenkant |
| 3 | Wat staat er op het masker: KN95 GB 2626-2006 |
| | Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. |
| | Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 4 | Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee |
| 5 | Aantal lagen van het masker: <i>buiten</i> <input checked="" type="checkbox"/> 1 wit <input checked="" type="checkbox"/> 2 Cotton <input checked="" type="checkbox"/> 3 nanof. <input checked="" type="checkbox"/> 4 Cotton <input checked="" type="checkbox"/> 5 wit |
| 6 | Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee |
| 7 | Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes |
| 8 | Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input type="checkbox"/> Erop gestanst <input checked="" type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v. |
| 9 | Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los |
| 10 | Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/> |

Bijzonderheden:




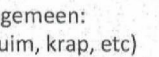
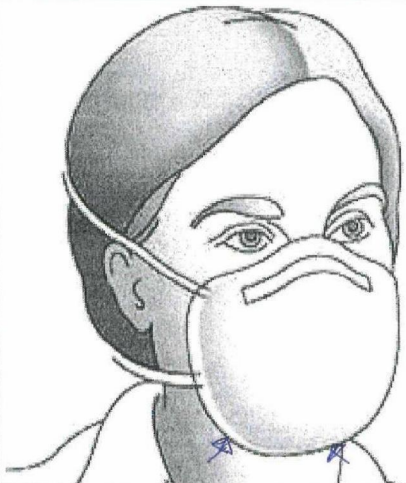
| DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT | | |
|--------------------------------------|--|--|
| 1 | Hoe past het masker op het gezicht? | <input checked="" type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/> |
| 2 | Waar ontsnapt lucht bij de leaktest | <input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch) |
| 3 | Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t. |
| 4 | Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? | <input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/> |

Bijzonderheden:

Fittest by RIVM

| | |
|--------------|----------|
| Datum | 7/5/2020 |
| LOT/X-nummer | 718 |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Fit factor real time test < 10 | <input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip | <input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam |
|--------------------------------|--|--|

| Tester: | Zonder clip of kam | | Met clip of kam | |
|--|--------------------|-------|------------------------|-------|
| | Opmerkingen | Score | Opmerkingen | Score |
| 1.  5.1.2e 2.  3.  4.  | doos 1 | — | | 69 |
| | doos 2 real time | <10 | | 4 |
| | lekt bij de lin | <10 | | 200+ |
| | | | | |
| Algemeen: (ruim, krap, etc) | | | | |
| Verschuift bij Up & Down/Bending? | | Ja | | Nee |
| | | | Is één clip voldoende? | Ja |
|  | | | | |
| Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is) | | | | |

| | |
|-------------------------|------|
| Type FFP Masker | P3 |
| Fit test (FAIL of PASS) | PASS |

Particle Penetration by Kalibra

| | |
|--------------|------------|
| Datum | 07-05-2020 |
| Inkoopnummer | 301696 |
| LOT/X-nummer | 758 |

| Q1 Particle Penetration | Gemiddelde rendement > 0,3 | Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3 | Gemiddelde rendement > 0,5 | Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Masker 1 | 100% | Pass P3 | 100% | Pass P3 |
| Masker 2 | 99% | Pass P3 | 100% | Pass P3 |
| Masker 3 | 100% | Pass P3 | 100% | Pass P3 |
| Totaal gemiddelde | 100% | Pass P3 | 100% | Pass P3 |

Ademweerstand:

| | Gemeten (< Pa) | Eis (< Pa) | Conclusie |
|----------|----------------|------------|-----------|
| Masker 1 | 110 | < 240 Pa | Pass |
| Masker 2 | 107 | | Pass |
| Masker 3 | 113 | | Pass |

| |
|-----------------------------|
| Eindoordeel > 0,3 |
| Voldoet P3 |
| Eindoordeel > 0,5 |
| Voldoet P3 |