

## Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	19-05
Lotnummer	979
Leverancier	HALMA
Productnaam of naam fabrikant	SEA-BASS
Productiedatum	03-05-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	958

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	99%	P3
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	<10	10
Testpersoon 2	<10	13
Testpersoon 3		
FFP2	<input checked="" type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958.	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	
Algemene bevindingen: 2 soorten maskers, afkeur op fit		

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	ja.	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

\* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	979
Datum uitvoering check	20-5-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	3D nano facial Projective mask (Starbu)		
Productiedatum	3-5-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
<b>Advies:</b>			
Type masker bij uitgifte:			
afkew.			

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 soorten maskers</li> <li>- gradeverschillen</li> <li>- afkew op fit</li> </ul>
----------------------------	---

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? 24 ipv 16 (eerde).
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak? 3D Nano Facial Protective mask.
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak? Jiangxi Homet Industrial Co.
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? <input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? <input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

## Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja: <i>perz</i>
2	Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input checked="" type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

## Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KNG5 GB2626-2006.
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

## Bijzonderheden:

- maskers met neusclip binnenkant en maskers met neusclip buitenkant.
- andere opdruk
- andere grootte
- andere manier van elastieken vastmaken
- elastieken dik/dun.

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <input type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest <input type="checkbox"/> Niet <input checked="" type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

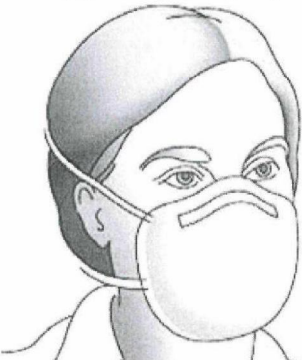
**Bijzonderheden:**

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

### Fittest by RIVM

Datum	19/5/20
LOT/X-nummer	979

Fit factor real time test < 10	<input checked="" type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	--	--

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1. <u>Pe (door 1)</u>	masker met nems clip in de stof	<10	niet sluitend te vrijgen	10
2. <u>5.1.2e (door 2)</u>		210		13
3. _____				
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				
			Is één clip voldoende?	
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
				

Type FFP Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

masker met nems clip buitenkant is niet  
getest

## Particle Penetration by Kalibra

Datum	19 mei 2020
Inkoopnummer	302448
LOT/X-nummer	979

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99%	Pass P3	100%	Pass P3
Masker 2	98%	Pass P2	100%	Pass P3
Masker 3	100%	Pass P3	100%	Pass P3
<b>Totaal gemiddelde</b>	99%	Pass P3	100%	Pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	104	< 240 Pa	Pass
Masker 2	97		Pass
Masker 3	120		Pass

<b>Eindoordeel &gt; 0,3</b>
Voldoet aan P3
<b>Eindoordeel &gt; 0,5</b>
Voldoet aan P3

5.1.2e

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

10-5-2020

Aantal inkooporder/pakbon

313-632

Lotnummer

979

Aantal pallets

33

Totaal stuks

313.632

Aantal samples

72

Totaal aantal na samples

313.560

Aantal per pallet

9504

Aantal per doos

864

Aantal per verpakkingseenheid

24



Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

Artikelnummer:

958

Inkooporder nummer

302448

LCH-nummer

3057-23160-STA0518A

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

15 - 44 - 03  
15 - 108 - 03

ingeboekt door:

2

Exemplaire pour / Exemplaar voor  
 Destinataire / geadresseerde / Empfänger  
 LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT  
 VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT  
 FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR AVC 25 Code transporteur / Vervoerderscode / Code Frachtführer No / Nr

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)  
 Absender (Name, Anschrift, Land)  
 Adma Solutions  
 yzerwerf 10-12  
 Obu TK Beuningen

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.  
 NL 0128  
 Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.  
 De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)  
 Empfänger (Name, Anschrift, Land)  
 LB  
 laandijkweg 12  
 4131 PB Vianen

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoeder (naam, adres, land)  
 Frachtführer (Name, Anschrift, Land)  
 AG Logistics Services  
 yzerwerf 10-12  
 Obu TK Beuningen

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)  
 Vianen, Nederland

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)  
 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)  
 32 BGV4

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)  
 18-5-20  
 Beuningen, Nederland

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoeder  
 Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten  
 Beigefügte Dokumente

6 Marques et numéros / Merken en nummers / Kennzeichen und Nummern  
 7 Nombre de colis / Aantal rollen / Anzahl der Packstücke  
 8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking / Art der Verpackung  
 9 Nature de la marchandise / Aard der goederen / Bezeichnung des Gutes  
 10 No sériel / Seriennummer / Seriennummer  
 11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg  
 12 Circonférence m3 / Volume in m3 / Umfang in m3

Verplichtingennummer: 3057-23160  
 lot 63 - X01g starbuss  
 33 pallets  
 363 dozen  
 313.632 stuks  
 9 europallets  
 24 ww  
 18 MAY '20 15:38  
 4100 kg

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender  
 Anweisungen des Absenders  
 \* geen extra's retour Vianen \*  
 9 Euro's

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten  
 Besondere Vereinbarungen

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift  
 Frachtzahlungsanweisungen  
 Franco / Frei  
 Non franco / Niet franco / Unfrei

20	Arrivé heure / Aankomsttijd / Ankunftszeit	Depart heure / Vertrektijd / Abfahrtszeit	Total heure / Totaaltijd / Gesamtzeit
Adresse de chargement: Laadadres: Ladeadresse:			
Adresse de déchargement: Losadres: Entladadresse:			

21 Etablie à / Opgemaakt te / Ausgefertigt in  
 le / de / am  
 Beuningen 18-5-20

15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung

22  
 A G Logistics Services B.V.  
 IJzerwerf 10-12  
 6641TK Beuningen  
 5.1.2e @aglogistics.nl  
 5.1.2e

23  
 5.1.2e

5.1.2e

Nabestellen: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

version 6.0 14/03/18 model IRU

To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakjes moeten ingevuld worden door de vervoeder / Die mit fett gedruckten Linien eingerahmten Blöcke müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden