

Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	14-9-2020
Inkoopnummer	302147
Lotnummer	870
Leverancier	Malma
Productnaam of naam fabrikant	Starkbuss
Productiedatum	28-4-2020
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	958 - KN95

Q1 Particle Penetration	Testgemiddelde	Type P1/P2/P3
0,3	99%	P2
0,5	100%	P3

Q2 Fit test	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	127	P2
Testpersoon 2	<10	10 → fijne rand.
Testpersoon 3	<10	P1.
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL	<input type="checkbox"/> PASS

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:			

Artikelnummer VWS	Quality Check	Uitleg indien ON HOLD:
958	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> On Hold	

Algemene bevindingen:

erzitten maskers durven met fijne rand → faal op fittest

Logistiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2		Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT		>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5	X	Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood	Ja	>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	870
Datum uitvoering check	15 mei 2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	Starbuss - 3D Nano Facial Protection mask		
Productiedatum	20-4-2020		
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
Advies: Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM	Gee doc. Belede Starbuss Nano facial protectie mask van Starbuss.	

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	verschillende soorten maskers - klein / groot - - fijn / grove rand.
----------------------------	--

maskers met fijne rand.

→ slechte fit

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	3D Nano Facial - Protective Masks
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Hik Starbus technology Group
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input checked="" type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input checked="" type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:..... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input checked="" type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	<i>per 2</i>
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input checked="" type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KNGI GB2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input type="checkbox"/> Metaal in de stof <input checked="" type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input type="checkbox"/> Goed <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input checked="" type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input checked="" type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input checked="" type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:


Fittest by RIVM

Datum	14/05/2020
LOT/X-nummer	870

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input checked="" type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	---	---

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
1.	5.1.2e real time	127		82
2.		<10		10
3.		<10		181
4.				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending?				
			Is één clip voldoende 5.1.2e	ja

doos 1
doos 2
doos 3

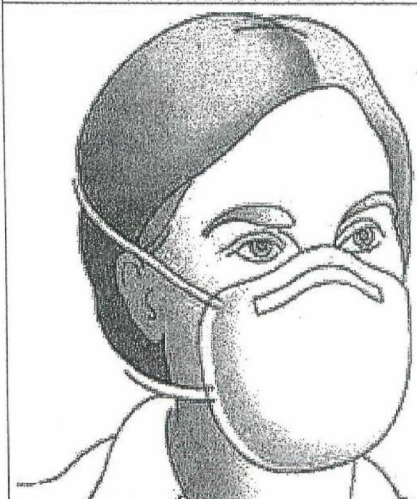

* doos 1 & 2 verschillen in de stans naad.?
duidelijk andere producties
* alle 3 opdeuk verschillen
* alle 3 verschilt veel gedrukt

Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)

Type FFP-Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	

Particle Penetration by Kalibra

Datum	14 Mei 2020
Inkoopnummer	302147
LOT/X-nummer	870

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99%	pass P3	100%	pass P3
Masker 2	99%	pass P3	100%	pass P3
Masker 3	100%	pass P3	100%	pass P3
Totaal gemiddelde	99%	Pass P3	100%	pass P3

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	140	< 240 Pa	pass
Masker 2	130		pass
Masker 3	137		pass

Eindoordeel > 0,3

voldoet aan P3

Eindoordeel > 0,5

voldoet aan P3

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: 5.1.2eDatum: 13-5-2020

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer: 070Aantal pallets 24Totaal stuks 149.184Aantal samples 48Totaal aantal na samples 149.136Aantal per pallet 6336Aantal per doos 576Aantal per verpakkingseenheid 16

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

 JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: _____

Paraaf: _____

Artikelnummer: 950Inkooporder nummer 302147

LCH-nummer

3057-23160-STA0513

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

Locatie:

22-163-02
22-209-02

ingeboekt door:

2

Exemplaire pour destinataire LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT
 Exemplaar voor geadresseerde VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT
 Exemplar für Empfänger Geadresseerde FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT

CMR

AVC

25 Code transporteur Vervoerderscode Code Frachtführer

No Nr

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)
 Absender (Name, Anschrift, Land)
 IJzerwerf 10-12
 6641TK Beuningen

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen is het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
 NL 20062171
 Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.
 De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, gedeponereerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)
 Empfänger (Name, Anschrift, Land)
 5.1.2h

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoerder (naam, adres, land)
 Frachtführer (Name, Anschrift, Land)
 AG Logistics Services
 IJzerwerf 10-12
 6641TK Beuningen

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering der goederen (plaats, land) / Auslieferungsort des Gutes (Ort, Land)
 5.1.2h

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)
 Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag de Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder
 Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten
 Beigefügte Dokumente

6 Marques et numéros / Merken en nummers
 Kennzeichen und Nummern
 7 Nombre de colis / Anzahl der Packstücke
 8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking
 9 Nature de la marchandise / Art der goederen
 10 No statistique / Statistisch nummer / Spalt-nr
 11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg
 12 Cubage m3 / Volume in m3
 3057 23160
 PAL
 lot 33: 5 dozen per pallet, 30 dozen. 20800st
 5000 kg

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender
 Anweisungen des Absenders
 lot 33: x010
 lot 34: x010
 ceak 1100

19 Conventions particulières / Speciale overeenkomsten
 Besondere Vereinbarungen

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift
 Frachtzahlungsanweisungen
 Franco / Frei
 Non franco / Niet franco / Unfrei

20 Arrivé heure / Aankomsttijd
 Ankomftszeit
 Depart heure / Vertrektijd
 Abfahrtszeit
 Total heure / Totalsijd
 Gesamtzeit
 Adresse de chargement:
 Laadadres:
 Ladeadres:
 Adresse de déchargement:
 Losadres:
 Entladeadres:

21 Etablie à / Opgemaakt te
 Ausgefertigt in le / de am

15 Reimbursement / Remboursement / Rückerstattung

22 AG Logistics Services B.V.
 IJzerwerf 10-12
 6641TK Beuningen
 5.1.2e @aglogistics.nl
 Tel: 5.1.2e

23

24 Marchandises reçues / Goederen ontvangen
 Gut empfangen
 Lieu / Plaats
 Ort le / de am

Nabestellen: www.logistiekconcurrent.nl Tel. 085 - 27 34 999

version 6.0 14/03/18 model IIRU

iekconcurrent.nl
 re renhuits voor de logistiek

Les parties encadrées de lignes grises doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde velden moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gedruckten Linien eingetragenen Angaben müssen vom Frachtführer ausgefüllt werden

To be completed on the sender's responsibility / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders