

Eindbeoordelingsformulier mondkmaskers

Chirurgisch masker

Datum	06/05/2020
Inkoopnummer (indien bekend)	301590
Lotnummer/X-nummer	601
Leverancier	
Productnaam of naam fabrikant	
Productiedatum	
Type mondkmasker (volgens de fabrikant)	

Waterkolom test	Gemiddeld	Standaarddeviatie
Resultaat	93	4,02
Algemene bevindingen:		

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-
Algemene bevindingen:			
afkeur, omdat het een nep 3M masker is.			

Quality Check:	Uitleg indien ON HOLD/Spattest/BFE:
<input type="checkbox"/> Goedgekeurd <input checked="" type="checkbox"/> Afkeur <input type="checkbox"/> ON HOLD <input type="checkbox"/> Spattest <input type="checkbox"/> BFE	
Algemene bevindingen:	
NEP PRODUCT	

Type masker	Aanvinken	Artikelnummer VWS
Chirurgisch masker Type I		956
Chirurgisch masker Type II		973
Chirurgisch masker Type IIR		974
Geen chirurgisch masker, niet gebruiken	X	N.v.t.

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	601.
Datum uitvoering check	6-5-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	3M. Standard Earloop Face Mask.		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
Advies: Type masker bij uitgifte: 3M geeft aan dat nep is. On hold, wachten BFE test			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	On hold, wachten op BFE → licht nep (geen 3M)
--------------------------	--

zou type II kunnen zijn¹

water volcom is net goed maar het is geen IIR
 → geen upgrade. ⇒ bericht van 3M = nep

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	50
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat: <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	Standard earloop face mask.
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	3M.
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input checked="" type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) type II <input type="checkbox"/> Y 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input type="checkbox"/> Los in de doos <input checked="" type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? <input type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: _____
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input checked="" type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenlant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

- masker is misschien fake? → geen 3M?
- net een ander weurtje bij de randen als bij 3M.
- BFE is gg'l. volgens, das en gg'l. volgens 3M.
- geen verstelbare bandjes → zou wel moeten
- PFE is lager dan zou moeten
y = toevallichaas meten

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT		
1	Hoe past het masker op het gezicht?	<input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	<input type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	<input type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>

Bijzonderheden:

Beoordelingsformulier

Waterkolom

Datum	06/05/2020
Inkoopnummer (indien bekend)	301590
LOT-nummer of X-nummer	601
Productsoort	Chirurgisch mondmasker

Waterkolomtest

Er worden twee maskers getest, deze worden elk in drie stroken geknipt en gemeten.

Meting	Resultaat
1	95
2	94
3	86
4	94
5	98
6	92
Gemiddelde	93
Standaarddeviatie	4,02

Uitslag waterkolomtest

PASS

FAIL

Particle Penetration by Kalibra

Datum	06-05-2020
Inkoopnummer	301590
LOT/X-nummer	601

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1 Doos 1	45%	Fail	66%	Fail
Masker 2 Doos 2	55%	Fail	75%	Fail
Masker 3 Doos 3	55%	Fail	76%	Fail
Totaal gemiddelde	52%	Fail	72%	Fail.

Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	45	< 240 Pa	Pass
Masker 2	55		Pass
Masker 3	48		Pass.

Eindoordeel > 0,3
Fail.
Eindoordeel > 0,5
Fail.

corona-advies

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@slimstock.com>
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 08:20
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@slimstock.com>
CC: [5.1.2e] <[5.1.2e]@slimstock.com>
Onderwerp: Fwd: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

Hoi,

Onderstaande partij afkeuren, met als opmerking imitatie 3M.

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@radboudumc.nl>
Verzonden: vrijdag, mei 8, 2020 7:03 AM
Aan: [5.1.2e] <[5.1.2e]@slimstock.com>
Onderwerp: RE: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

Jazeker blokken

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

----- Oorspronkelijk bericht -----

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@slimstock.com>
Datum: 08-05-2020 00:11 (GMT+01:00)
Aan: "[5.1.2e]" <[5.1.2e]@radboudumc.nl>
Onderwerp: Fwd: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

[5.1.2e]

Uit Bergambacht een partij imitatie 3M.
Ik neem aan dat we die sowieso blokkeren en niet meer gaan leveren? Gaat om 25.000 stuks.

[5.1.2e]

Van: [5.1.2e] <[5.1.2e]@arbode.nl>
Verzonden: donderdag, mei 7, 2020 5:37 PM
Aan: [5.1.2e]
CC: [5.1.2e]
Onderwerp: FW: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

Hallo [5.1.2e]

Het bleek inderdaad een nep 3M masker. Dit gaat over lot 601. In de bijlage een echt 3M 1826 masker.

Willen wij dit lotnummer en andere lotnummers van de 1826 maskers naar 3M sturen? En aangeven van wie deze partij komt? Zie de vraag van 3M hieronder. En zo ja, wie gaat dit uitzoeken?

Ik weet zo niet om welke andere lotnummers dit ook gaat. Ik heb het masker volgens mij wel eerder gezien.

Groeten, 5.1.2e

Beste 5.1.2e,

Als aanvulling op mijn voorgaande mail zou ik u ook graag willen vragen om de **lotnummers** van de 1826 maskers naar ons toe te sturen!

Bvd.

Met vriendelijke groet - kind regards,

5.1.2e

3M Science.
Applied to Life.™

5.1.2e

3M Medical Solutions Division, Health Care Business Group

3M Central Europe Region

3M Nederland BV, Molengraaffsingel 29 | 2629JD Delft The Netherlands

Office: +31 0 5.1.2e | Mobile: +31 0 5.1.2e

5.1.2e @mmm.com | www.3M.com



3M.com

Alle prijzen die per e-mail worden gecommuniceerd zijn vrijblijvend: rechtsgeldige prijsafspraken kunnen uitsluitend door een daartoe bevoegde 3M vertegenwoordiger worden gemaakt.

Van 5.1.2e <5.1.2e@mmm.com>

Verzonden: donderdag 7 mei 2020 16:53

Aan: 5.1.2e <5.1.2e@arbone.nl>

CC: 5.1.2e <5.1.2e@mmm.com>

Onderwerp: RE: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

Beste 5.1.2e,

Dank voor uw oplettendheid!

In de bijlage een foto van het **3M** masker 1826. Hierop zijn een aantal opvallende verschillen t.o.v. de foto die u ons heeft gestuurd;

- Het 3M logo rechts onderaan het masker (deze mist op uw foto)
- De "stiksels" op 3M masker zijn groter (langer, geen puntjes)
- Het aantal rijen stiksels is verschillend
- Omslag rand (afwerking) aan li- en re- zijde (ontbreekt op uw foto)
- Neusbeugel is omgeven door 2 rijen stiksels
- Etc.

Het lijkt er dus sterk op dat u heeft te maken met een nep 3M masker.

Mag ik u vragen via welk kanaal/leverancier u deze order heeft ontvangen?

Vanuit 3M willen we ook graag het nodige doen om dit soort praktijken tegen te gaan.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet - kind regards,

5.1.2e



5.1.2e

3M Medical Solutions Division, Health Care Business Group
 3M Central Europe Region
 3M Nederland B.V. Molengraaffsingel 29 | 2629JD Delft The Netherlands
 Office: +31 0 5.1.2e Mobile: +31 0 5.1.2e
 5.1.2e @mmm.com | www.3M.com



3M.com

Alle prijzen die per e-mail worden gecommuniceerd zijn vrijblijvend: rechtsgeldige prijsafspraken kunnen uitsluitend door een daartoe bevoegde 3M vertegenwoordiger worden gemaakt.

From: 5.1.2e <5.1.2e@mmm.com>
Sent: donderdag 7 mei 2020 12:31
To: 5.1.2e <5.1.2e@mmm.com>; 5.1.2e <5.1.2e@mmm.com>; 5.1.2e @mmm.com>
Subject: FW: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

Dit kunnen jullie beter beoordelen dan ik.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

Personal Safety Division
 3M Central Europe Region
 3M Nederland B.V. | Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft | Nederland
 Mobile: +31 6 5.1.2e
 5.1.2e @mmm.com |

From: 5.1.2e <5.1.2e@arbode.nl>
Sent: donderdag 7 mei 2020 11:59
To: 5.1.2e <5.1.2e@mmm.com>
Subject: [EXTERNAL] 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

Beste 5.1.2e

Sorry er kwam een overleg tussendoor. Vanochtend belde ik je over een 3M chirurgisch masker dat bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is binnengekomen. We vragen ons af of dit een echt product is van 3M.

Het gaat om een Standard Earloop Face Mask, 1826.

Het masker heeft oorelastieken, terwijl het op jullie site een verstelbaar tie-on systeem zou moeten hebben. Het masker heeft volgens de verpakking een PFE van minimaal 95% (dus niet BFE, maar PFE). We hebben dit getest en de PFE is slechts 52%.

Zou je op de foto's willen kijken of dit een echt product van jullie is?

We horen het graag.

Groeten,

5.1.2e

Namens het Testcentrum voor het Landelijk consortium hulpmiddelen

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Aan dit bericht en de bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend. Heeft u deze e-mail onbedoeld ontvangen? Dan verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Openbaar maken, kopiëren en verspreiden van deze e-mail of informatie uit deze e-mail is alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de afzender. Het Radboudumc staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer 41055629.

The content of this message is intended solely for the addressee. No rights can be derived from this message or its attachments. If you are not the intended recipient, we kindly request you to delete the message and inform the sender. It is strictly prohibited to disclose, copy or distribute this email or the information inside it, without a written consent from the sender. Radboud university medical center is registered with the Dutch Chamber of Commerce trade register with number 41055629.

corona-advies

Van: [redacted] <[redacted]@gmail.com>
Verzonden: vrijdag 8 mei 2020 09:54
Aan: [redacted]
Onderwerp: Fwd: Antw: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

Svp printen en bij LOT 601 voegen (fysiek en digitaal)

Met vriendelijke groet,

[redacted]
 [redacted]
 [redacted]

Testcentrum Landelijk consortium hulpmiddelen

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [redacted] <[redacted]@rivm.nl>
Onderwerp: Antw: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?
Datum: 7 mei 2020 om 18:17:27 CEST
Aan: [redacted] <[redacted]@arbode.nl>, [redacted]
 <[redacted]@gmail.com>, "[redacted]@ergoinvent.nl"
 <[redacted]@ergoinvent.nl>, [redacted] <[redacted]@erasmusmc.nl>, [redacted]
 <[redacted]@rivm.nl>, "[redacted]" <[redacted]@InspectieSZW.nl>, [redacted]
 [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Goed om ook [redacted] van ISZW en [redacted] van het RIVM op de hoogte te brengen, zie cc

Van: [redacted] <[redacted]@arbode.nl>
Verzonden op: donderdag 7 mei 2020 17:44
Aan: [redacted] <[redacted]@gmail.com> [redacted] <[redacted]@ergoinvent.nl> [redacted]
 [redacted] <[redacted]@erasmusmc.nl> [redacted] <[redacted]@rivm.nl> [redacted]
 [redacted] <[redacted]@rivm.nl>

Onderwerp: FW: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?


Hallo allemaal,

Het 3M chirurgisch mondmasker type II, type 1826, uit lotnummer 601 blijkt nep te zijn.

In de bijlage als eerste het echte 3M masker (foto 1826), in de rest van de foto's onze nepversie.

Goed om dit in de gaten te houden.

Groeten [redacted]

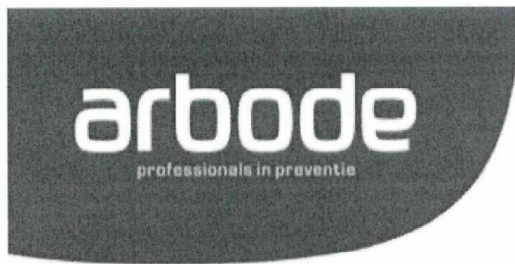

5.1.2e
 +31 5.1.2e
 +31
 Papiaans 41J
 4206 CL Gorinchem
 5.1.2e @arbode.nl
www.arbode.nl

This e-mail is intended for the addressee's eyes only. If you are not the intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of this. In view of the electronic nature of this communication, Arbode is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained therein nor for any delay in its receipt. For information about Arbode, direct your browser to www.arbode.nl

Ga nu naar Coronahelpdesk.nu om te zien hoe je weer veilig aan het werk kunt

Van: 5.1.2e <5.1.2e@mmm.com>
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 16:53
Aan: 5.1.2e <5.1.2e@arbode.nl>
CC: 5.1.2e <5.1.2e@mmm.com>
Onderwerp: RE: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

Beste 5.1.2e,

Dank voor uw oplettendheid!

In de bijlage een foto van het **3M** masker 1826. Hierop zijn een aantal opvallende verschillen t.o.v. de foto die u ons heeft gestuurd;

- Het 3M logo rechts onderaan het masker (deze mist op uw foto)
- De "stiksels" op 3M masker zijn groter (langer, geen puntjes)
- Het aantal rijen stiksels is verschillend
- Omslag rand (afwerking) aan li- en re- zijde (ontbreekt op uw foto)
- Neusbeugel is omgeven door 2 rijen stiksels
- Etc.

Het lijkt er dus sterk op dat u heeft te maken met een nep 3M masker.

Mag ik u vragen via welk kanaal/leverancier u deze order heeft ontvangen?

Vanuit 3M willen we ook graag het nodige doen om dit soort praktijken tegen te gaan.

Mochten er nog vragen zijn, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet - kind regards,

5.1.2e



5.1.2e

3M Medical Solutions Division, Health Care Business Group
 3M Central Europe Region
 3M Nederland BV, Molengraaffsingel 29 | 2629 JD Delft The Netherlands
 Office: +31 0 5.1.2e Mobile: +31 5.1.2e
 5.1.2e @mmm.com | www.3M.com



Alle prijzen die per e-mail worden gecommuniceerd zijn vrijblijvend: rechtsgeldige prijsafspraken kunnen uitsluitend door een daartoe bevoegde 3M vertegenwoordiger worden gemaakt.

From: 5.1.2e @mmm.com>

Sent: donderdag 7 mei 2020 12:31

To: 5.1.2e @mmm.com> 5.1.2e 5.1.2e @mmm.com>; 5.1.2e 5.1.2e @mmm.com>

Subject: FW: 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

Dit kunnen jullie beter beoordelen dan ik.

Met vriendelijke groet,



5.1.2e

Personal Safety Division
 3M Central Europe Region
 3M Nederland B.V. | Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft | Nederland
 Mobile: +31 5.1.2e
 5.1.2e @mmm.com |

From: 5.1.2e 5.1.2e @arbode.nl>

Sent: donderdag 7 mei 2020 11:59

To: 5.1.2e @mmm.com>

Subject: [EXTERNAL] 3M chirurgisch masker 1826 echt of niet?

Beste 5.1.2e

Sorry er kwam een overleg tussendoor. Vanochtend belde ik je over een 3M chirurgisch masker dat bij het Landelijk Consortium Hulpmiddelen is binnengekomen. We vragen ons af of dit een echt product is van 3M.

Het gaat om een Standard Earloop Face Mask, 1826.

Het masker heeft oorelastieken, terwijl het op jullie site een verstelbaar tie-on systeem zou moeten hebben.

Het masker heeft volgens de verpakking een PFE van minimaal 95% (dus niet BFE, maar PFE). We hebben dit getest en de PFE is slechts 52%.

Zou je op de foto's willen kijken of dit een echt product van jullie is?

We horen het graag.

Groeten,

5.1.2e

Namens het Testcentrum voor het Landelijk consortium hulpmiddelen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het RIVM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

www.rivm.nl *De zorg voor morgen begint vandaag*

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. RIVM accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

www.rivm.nl/en *Committed to health and sustainability*

Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger:

5.1.2e

Datum:

24-4-20

Aantal inkooporder/pakbon

Lotnummer

601

Aantal pallets

2

Totaal stuks

24950

Aantal samples

150

Totaal aantal na samples

24800

Aantal per pallet

12500

Aantal per doos

500

Aantal per verpakkingseenheid

50

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam:

Paraaf:

5.1.2e

Artikelnummer:

Inkooporder nummer

301590

LCH-nummer

Geenorder 35-601

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

MASKERS
 KOOLWIJK VOORRAAD GAAT OPNIEMEN HET
 PROCES IN

Locatie:

21-76-01
+
21-7801

ingeboekt door: