

## Eindbeoordelingsformulier - FFP Mondmaskers (LOT-nummers)

Datum	30-06
Lotnummer	1912
Leverancier/LCH-nummer	2020-0154-0105
Productnaam of naam fabrikant	FFP2 half mask
Productiedatum	-
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	FFP2

Q1 Particle Penetration 0,3	Percentage	Type P1/P2/P3
Masker 1	99	P3
Masker 2	99	P3
Masker 3	99	P3

Q2 Fittest	Zonder clip	Met clip
Testpersoon 1	50	81
Testpersoon 2	-	33
Testpersoon 3	-	57
FFP2	<input type="checkbox"/> FAIL <input checked="" type="checkbox"/> PASS	

Q3 en Q4	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI			-

Artikelnummer VWS	Quality Check
<input type="checkbox"/> 957 (FFP1)	<input type="checkbox"/> Goedgekeurd
<input checked="" type="checkbox"/> 958 (FFP2)	<input checked="" type="checkbox"/> Afkeur
<input type="checkbox"/> 971 (KN95)	
Algemene bevindingen:	
<p>- srafeen in laag toegevoegd; risico onduidelijk</p> <p>- "non-medical use" op doos vermeld</p>	

Logstiek	Aankruisen	Classificatie	Clip (Ja/Nee)	Specs.	
				PFE	FIT
Mand 1		Goedkeur: FFP2		>94%	>100
Mand 2	X	Goedkeur: FFP2 met instructie over FIT	ja	>94%	33<FIT<100
Mand 3		Afkeur: FFP1, filter van mindere kwaliteit*		80%<PFE<94%	>100
Mand 4		Afkeur: FFP1, buiten acute zorg, met instructie over FIT (Q57)		80%<PFE<94%	33<FIT<100
Mand 5		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		>94%	<33
Mand 6		Afkeur: Alleen uitleveren bij hoge nood		80%<PFE<94%	<33
Mand 7		Afkeur: Niet gebruiken		< 80	Ongeacht fit

\* ingekocht FFP1 in mand 3 boeken als goedkeur

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

### Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	1912
Datum uitvoering check	3/7/2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	FFP2 Particle Filtering Half Mask		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie	5.1.2e		
Besproken met RIVM			
<b>Advies:</b>			
Type masker bij uitgifte:			

#### Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënisten beoordelen opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

#### Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Declaration of conformity aanwezig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="checkbox"/> Nee
Oordeel van RIVM		

#### Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënisten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- spraken toegevoegd: gezondheidsrisico onduidelijk</li> <li>- "non-medical use" op doos vermeld</li> </ul>
----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BINNENDOOS/PLASTICZAK		
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak?	40
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc)	<input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:  <input type="checkbox"/> Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?	FFP2 Particle Filtering Half Mask
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?	Shenguan
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> EN 149 (FFP) <input type="checkbox"/> N95 <input type="checkbox"/> KN95 <input type="checkbox"/> P2 (Australia) <input type="checkbox"/> KMOEL- 2017-64 Korea <input type="checkbox"/> DS (Japan JMHLW-- <input type="checkbox"/> EN 14683 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY 0469-2011 (Surgical) <input type="checkbox"/> YY/T 0969 (Face mask) <input type="checkbox"/> GB2626-2006 <input type="checkbox"/> Anders:.... <input type="checkbox"/> Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd?	<input type="checkbox"/> Staat op de doos <input checked="" type="checkbox"/> Los in de doos <input type="checkbox"/> Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input checked="" type="checkbox"/> N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

## Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER		
1	Zit er verpakking om het masker?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
	Zo ja:	<i>Verpakt per 2</i>
2	Hoe is de verpakking te openen?	<input checked="" type="checkbox"/> Gemakkelijk <input type="checkbox"/> Lastig <input type="checkbox"/> Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos?	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af:

## Bijzonderheden:

*dopjes BTJ geleverd in doos*

LCH & VWS USE ONLY

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? <input checked="" type="checkbox"/> Integriteit in orde <input type="checkbox"/> Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Ontbreekt <input checked="" type="checkbox"/> Nee, het volgende wijkt af: <i>voorn iets anders</i>
3	Wat staat er op het masker: <i>Shengnan CE2834 EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR SW 70369B</i>
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Is de stof is non woven? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee
5	Aantal lagen van het masker: <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input checked="" type="checkbox"/> 5
6	Heeft het masker een nare geur? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? <input type="checkbox"/> Met hoofdbanden <input checked="" type="checkbox"/> Met oor elastieken <input type="checkbox"/> Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? <input checked="" type="checkbox"/> Erop gestanst <input type="checkbox"/> Erin gestanst <input type="checkbox"/> Gelijmd <input type="checkbox"/> Genaaid <input type="checkbox"/> Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? <input checked="" type="checkbox"/> Goed stevig vast <input type="checkbox"/> Bij een keer dragen geen probleem <input type="checkbox"/> Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk <input checked="" type="checkbox"/> Metaal in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof met metalen kern in de stof <input type="checkbox"/> Kunststof in de stof <input type="checkbox"/> Metaal aan de buitenkant <input type="checkbox"/> Met filterdoek afgedekt <input type="checkbox"/> Rubber strip <input checked="" type="checkbox"/> Binnenzijde zit schuimstrip

## Bijzonderheden:

*Masker bevat "biomass graphene healfiber"  
Gezondheidsrisico onduidelijk.*

DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht? <input checked="" type="checkbox"/> Goed <input type="checkbox"/> Ruimte bij de kin <input type="checkbox"/> Ruimte bij neusstuk na aandrukken <input type="checkbox"/> Slechte aansluiting bij wangen <input type="checkbox"/>
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest? <input checked="" type="checkbox"/> Niet <input type="checkbox"/> Neus <input type="checkbox"/> Kin <input type="checkbox"/> Zijkant <input type="checkbox"/> N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <i>met dopjes: weekt niet.</i> <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt? <input checked="" type="checkbox"/> Masker blijft op zijn plek <input type="checkbox"/> Masker verschuift <input type="checkbox"/>
5	Behoudt de neusklem zijn vorm gedurende circa 1 min? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee <input type="checkbox"/> N.v.t.
6	Chirurgisch masker: Wat is de hoogte van het masker wanneer deze uitgevouwen is?
7	Chirurgisch masker: wat is de lengte van de neusklem?

Bij een chirurgisch masker			
Doos	Materiaal neusbeugel	Breedte neusbeugel	Lengte van het uitgeklapte masker
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			


Bijzonderheden:

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

## Fittest by RIVM


Datum	2/7/20
LOT/X-nummer	1912

Fit factor real time test < 10	<input type="checkbox"/> Ja, test alleen met Clip	<input checked="" type="checkbox"/> Nee, test zonder en met clip of kam
--------------------------------	---------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------

Tester:	Zonder clip of kam		Met clip of kam	
	Opmerkingen	Score	Opmerkingen	Score
5.1.2e (1)		50		81
2. 5.1.2e doos 2	C10			33
3. 5.1.2e (doos 3)	C10			57
4. _____				
Algemeen: (ruim, krap, etc)				
Verschuift bij Up & Down/Bending? <i>namwelijk</i>			Is één clip voldoende? <i>ja</i>	
Extra opmerkingen (eventueel met pijlen waar lekkage is)				
 <p><i>draagt pretty: maar adem weerstand nemt fo na 10 min-</i></p>				

Type FFP Masker	
Fit test (FAIL of PASS)	<i>Pass</i>

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

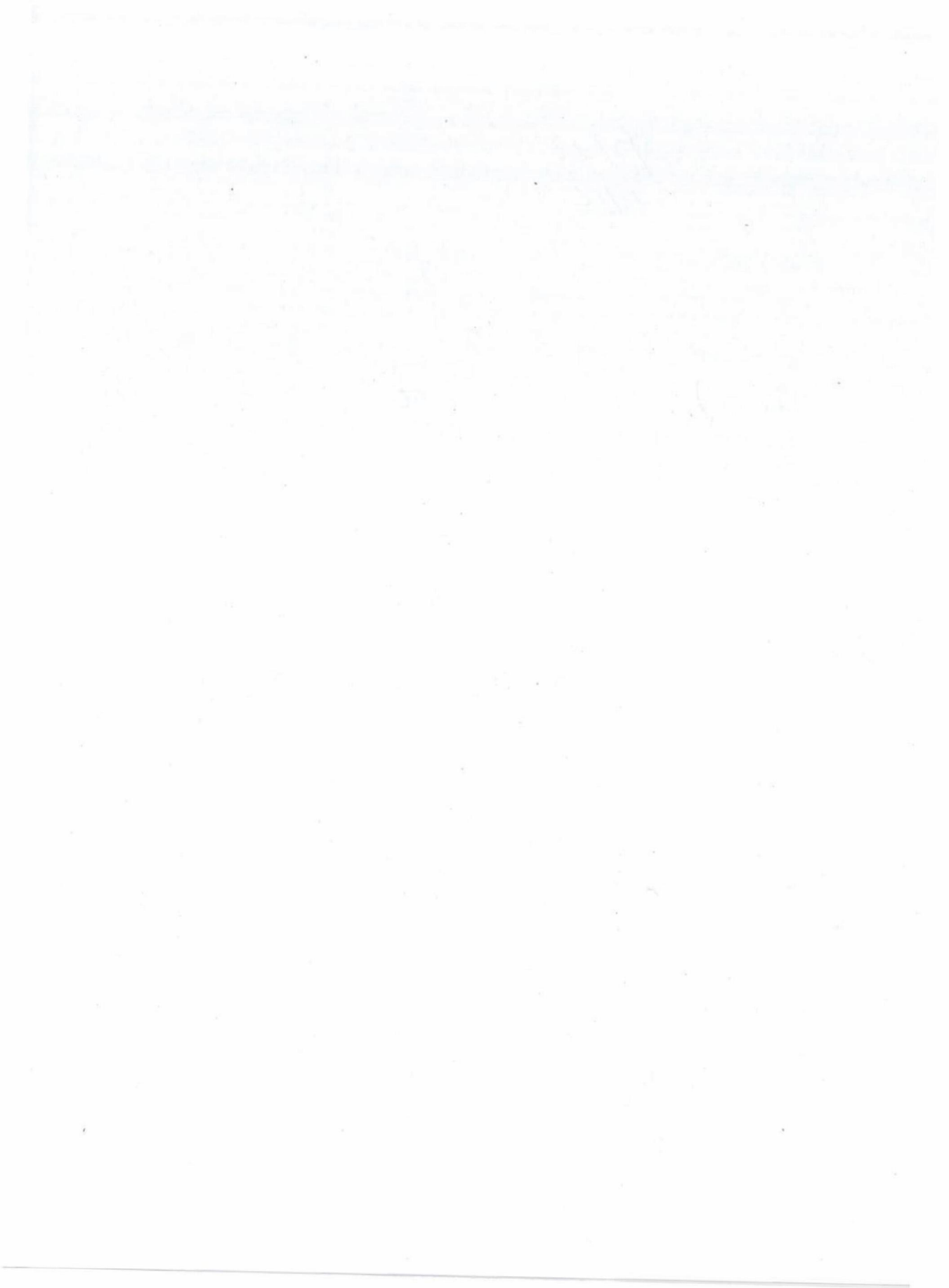

## Particle Penetration by Kalibra

Datum	2-7-2020.
Inkoopnummer	305 365.
LOT/X-nummer	1912.

Q1 Particle Penetration	Gemiddelde rendement $\geq 0,3$	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	99%	Pass P3
Masker 2	99%	Pass P3
Masker 3	99%	Pass P3

### Ademweerstand:

	Gemeten (< Pa)	Eis (< Pa)	Conclusie
Masker 1	105	< 240 Pa	Pass
Masker 2	83		Pass
Masker 3	109		Pass.

### Eindoordeel $\geq 0,3$ :

Beoordeling op basis van masker met het laagste filterrendement.

- fail  
 voldoet P1  
 voldoet aan P2  
 voldoet aan P3

**Disclaimer:** Deze rapportage bevat een onafhankelijk indicatief oordeel van de kwaliteit van de producten. Dit betekent dat deze resultaten slechts een gedeeltelijke weergave zijn van de kwaliteit van de producten. De rapportage is alleen te gebruiken door het LCH en het ministerie VWS ter ondersteuning bij het vrijgeven van producten op de markt. Gegevens uit deze rapportage mogen niet gedeeld worden met derden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is verzonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en de rapportage te verwijderen. Het LCH en het ministerie VWS aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

## Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: \_\_\_\_\_

5.1.2e

Datum: \_\_\_\_\_

30/6

Aantal inkooporder/pakbon \_\_\_\_\_

Lotnummer \_\_\_\_\_

1912

Aantal pallets

8

Totaal stuks

81.920

Aantal samples

120

Totaal aantal na samples

82000



Aantal per pallet

10.240

Aantal per doos

640

Aantal per verpakkingseenheid

40

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: \_\_\_\_\_

Paraaf: \_\_\_\_\_

Artikelnummer: \_\_\_\_\_

g50

Inkooporder nummer

305365

LCH-nummer

LCH 2020-0154 - 0105

exp. dnt = 06/2023

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD


Bijzonderheden:

LCH. 2020.0154-0105

Locatie:

020 - 112 - 01  
70/1/121 020. 126 - 01

ingeboekt door:

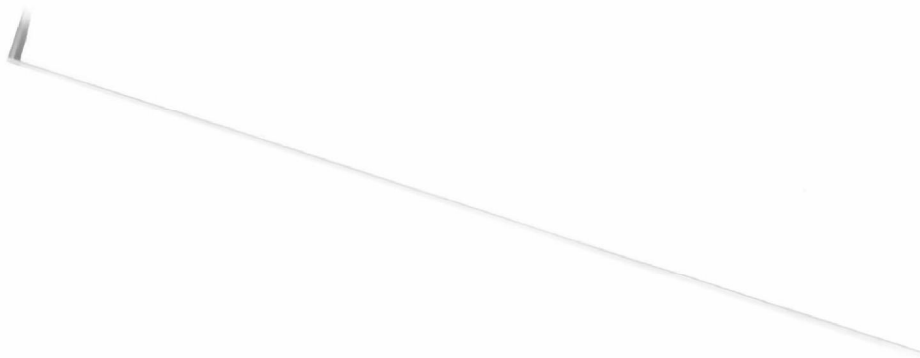

Exemplaire pour destinataire  
Exemplar für geadresseerde  
Empfänger

LETTRE DE VOITURE - DOCUMENT DE TRANSPORT  
VRACHTBRIEF - VERVOERDOCUMENT  
FRACHTBRIEF - TRANSPORTDOKUMENT



Code transporteur Vervoerderscode  
Code Frachtführer No Nr 12989

1 Expéditeur (nom, adresse, pays) / Afzender (naam, adres, land)  
Absender (Name, Anschrift, Land)  
KLM  
Schiphol

Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in twee verschillende landen zijn het CMR-Verdrag alsmede in aanvulling daarop de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.  
NL  
Indien de overeengekomen plaats van inontvangstneming en van aflevering van de zaken zijn gelegen in Nederland zijn de Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, van toepassing.  
De Algemene Vervoercondities 2002, laatste versie, zijn door sVa / Stichting Vervoerders gedgeponeerd ter griffie van de arrondissementrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2 Destinataire (nom, adresse, pays) / Geadresseerde (naam, adres, land)  
5.1.2h

16 Transporteur (nom, adresse, pays) / Vervoeder (naam, adres, land)  
Frachtführer (Name, Anschrift, Land)  
Henri Verkleij Transport  
Rietkraag 9 - 3411 GN Lopik - NL  
Mobiel: 5.1.2e  
1.21 Functionele emailaddress: @gmail.com

3 Lieu prévu pour la livraison de la marchandise (lieu, pays) / Plaats (bestemd) voor de aflevering de  
5.1.2h  
NL

17 Transporteurs successifs (nom, adresse, pays) / Opvolgende vervoerders (naam, adres, land)  
Nachfolgende Frachtführer (Name, Anschrift, Land)

4 Lieu et date de la prise en charge de la marchandise (lieu, pays, date) / Plaats en dat. v. inontvangstneming der goederen (plaats, land, datum) / Ort und Tag der Übernahme des Gutes (Ort, Land, Datum)  
Schiphol 30 06-2020

18 Réserves et observations du transporteur / Voorbehoud en opmerkingen van de vervoerder  
Vorbehalte und Bemerkungen des Frachtführers

5 Documents annexés / Bijgevoegde documenten  
Beliefte Dokumente

6 Marques et numéros / Merken en nummers  
Kenakoch en Nummern  
7 Nombre de colis / Aantal coli  
Aantal der Packstücke  
8 Mode d'emballage / Wijze van verpakking  
Art der Verpackung  
9 Nature de la marchandise / Aard der goederen  
Beteekening des Gutes  
10 No statistique / Statistisch nummer / Statistieknummer  
11 Poids brut, kg / Bruto gewicht in kg / Bruttogewicht in kg  
12 Cubage m3 / Volume in m3  
Umfang in m3  
33 x Europallet - medische goederen  
- 074-3648 5120 - LCH 2020-0209-02 - 25 pallets  
- 074 3648 5562 - LCH 2020-0154 - 8 pallets

13 Instructions de l'expéditeur / Instructies afzender  
Anweisungen des Absenders  
regelms: 3538225

1  
5.1.2h

14 Prescriptions d'affranchissement / Frankeringsvoorschrift  
Frachtzahlungsanweisungen  
 Franco / Frei  
 Non franco / Niet franco / Unfrei

20 A partir de / Na toelating  
door / Zu zahlen vom:  
Prix de transport / Vrachtprijs  
Fracht  
Réductions / Kortingen  
Ermäßigungen:  
Solde / Solde  
Zwischensumme:  
Suppléments / Supplément  
Zuschläge:  
Frais accessoires / Bijzondere  
de kosten / Nebenabgaben  
TOTAL / TOTAAL  
GESAMTSUMME

21 Etablie à / Opgemaakt te  
Ausgefertigt in  
Schiphol le / de  
am 30 06-2020

15 Remboursement

2  
5.1.2e

23  
BT-XF-03  
5.1.2h

Signature et timbre de l'expéditeur / Handtekening en stempel  
van de afzender / Unterschrift und Stempel des Absenders

Signature van de v

Model IRU / Auteursrecht sVa / Stichting Vervoerders - s-Gravenhage

www.beurtvaartadres.nl

Tel. 5.1.2e

Uitgave Beurvaartadres

versie 3.2 Art. 3002

Les parties encadrées de lignes grasses doivent être remplies par le transporteur / De dik omlijnde vakken moeten ingevuld worden door de vervoerder / Die mit fett gestrichelten Linien eingerahmten Rubriken müssen von Frachtführer ausgefüllt werden

A remplir sous la responsabilité de l'expéditeur / In te vullen onder verantwoordelijkheid van de afzender / Auszufüllen unter der Verantwortung des Absenders



LA 42 NIM

