

To: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl
Cc: (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @amsterdamumc.nl; (10)(2e) (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl; (10)(2e) (10)(2e) @amsterdamumc.nl; (10)(2e) (10)(2e) @amsterdamumc.nl; (10)(2e) (10)(2e) @ggd.amsterdam.nl
From: opschalingslabs
Sent: Wed 5/27/2020 8:52:08 PM
Subject: RE: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19
Received: Wed 5/27/2020 8:52:08 PM

Dank je wel (10)(2e)

Goed om jullie procedure te lezen. Ik denk dat er winst te halen is met de sponsjes voor groter volume oral fluid.

We komen er binnenkort op terug.

Met vriendelijke groeten,

(10)(2e)

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Sent: woensdag 6 mei 2020 16:06
To: opschalingslabs <(10)(2e)@rivm.nl>
Subject: FW: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19

From: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>
Sent: woensdag 6 mei 2020 16:02
To: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@rivm.nl>
Cc: (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@amsterdamumc.nl>; (10)(2e) <(10)(2e)@ggd.amsterdam.nl>
Subject: RE: speekselafname in diagnostiek voor COVID-19

Beste (10)(2e)

Bij deze een rapportje van de speekselproeven die we op het GGD Streeklaboratorium hebben uitgevoerd vanaf vorige week woensdag middag 29 april t/m maandag 4 mei.

We concluderen dat speeksel op zich wel is te gebruiken, maar het is niet superieur aan gebruik van de E-swab.

We hadden verschillende problemen met speeksel:

- er werd te weinig gespuugd (soms maar een spatje) lijkt me lastig om echt genoeg te verzamelen door te spugen
- het speeksel was soms erg slijmerig en taai: bijna niet te pipetteren door onze extractie robot (de MP24)

Mijn voorstel zou zijn: gebruik speeksel als back up materiaal in geval er te weinig swabs zijn, in thuisafname situaties. En dan met hele goede instructies.

En als je goede thuisafnames wilt: gebruik dan gewoon het stokje van de E-swab om keel (speeksel ook bij gebit) én neus (snot) te bemonsteren.


Dit blijkt al de hele tijd prima te werken hier in Amsterdam (zowel ziekenhuis Dijklander als vanuit huisartsen).

Ben benieuwd naar de vondsten van anderen 😊!

Groet, mede namens (10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e)

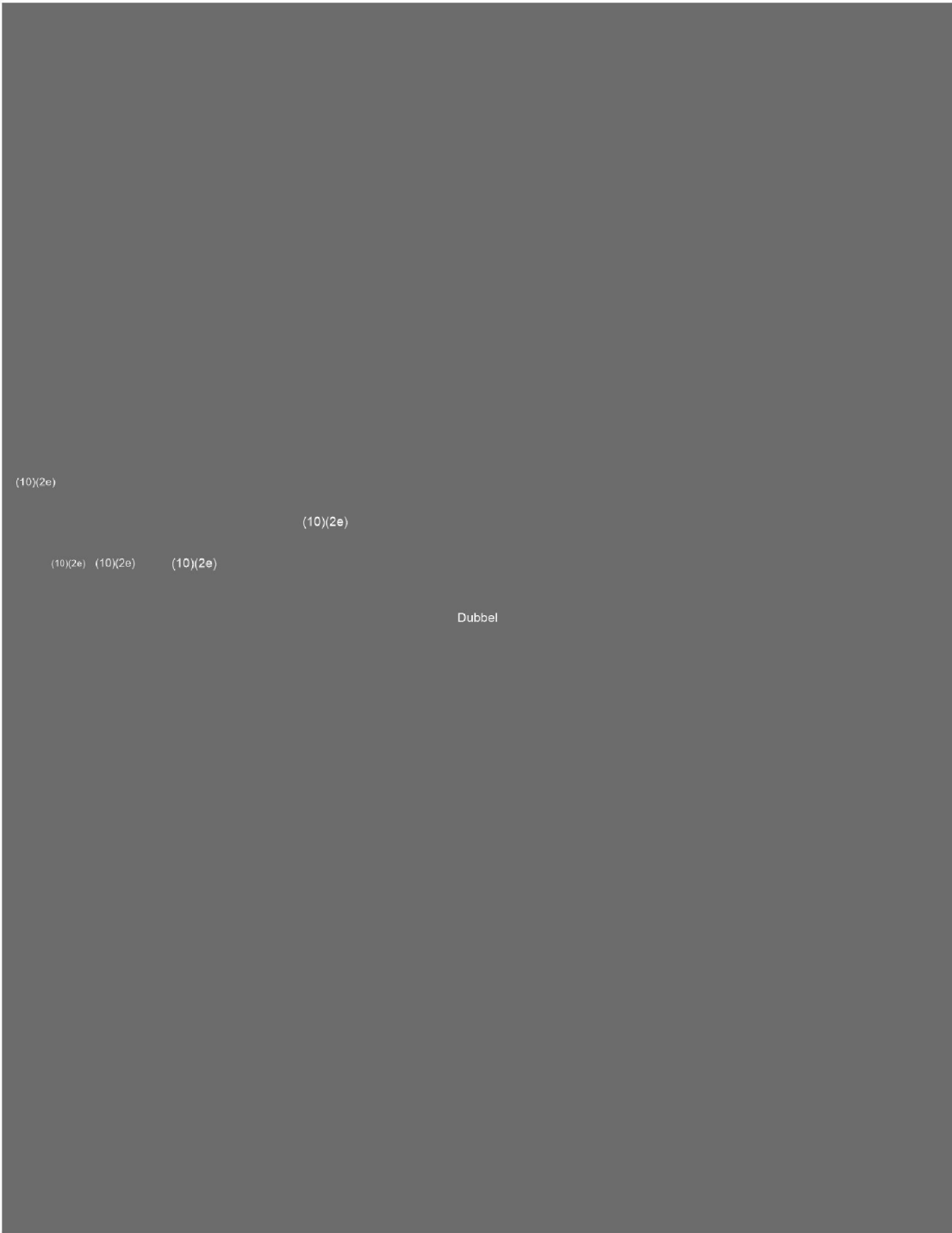

(10)(2e)

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e) (10)(2e)

Dubbel

(10)(2e)

(10)(2e) (10)(2e)

Dubbel