
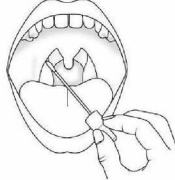
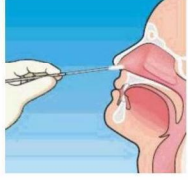
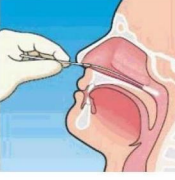





### Zelfafname respiratoire onderzoek (coronavirus); Transwab

1	2a	2b	
			
<p>In de verpakking zit <b>één</b> Transwab (paarse dop) met <b>twee</b> wattenstaafjes (<b>dikke en dunne</b>).</p> <p>Haal het busje met vloeistof en wattenstaafjes uit de verpakking.</p>	<p>Strijk het <b>dikke</b> wattenstaafje één keer langs de linker gehemelteboog / keelamandelen (naast de huig) en één keer langs de rechterboog.</p>	<p>Breng het <b>dunne</b> wattenstaafje door <b>één</b> neusgat (via de onderste neusgang) tot de nasopharynx (± 1/2 to 2/3)</p>	<p>Trek met een roterende beweging het <b>dunne</b> wattenstaafje terug.</p> <p>NB. tranen/hoesten bij dit onderzoek is normaal. Enkele malen slikken voorkomt hoesten.</p>
3	4		
			
<p>Steek de <b>twee wattenstaafjes</b> na het maken van de uitstrijken tot op de bodem van de bus. Breek het kweekstokjes bij het rode streepje af.</p>	<p>Draai de dop goed op de bus.</p>	<p>Zorg dat uw naam, geslacht en geboortedatum op het busje komen (sticker/stift).</p>	

NB.

- De vloeistof blijft in de bus
- Was bij spatten de huid met water en zeep
- Spoel bij spatten in het oog met heel veel water